

TEKERLEKLİ SANDALYE LAZIMLIKLI
MODEL NO: RLTS-03
Kullanım Kılavuzu

**PARAMETRELERİ**

TOPLAM BOY	92CM
TOPLAM GENİŞLİK	61.5CM
TOPLAM UZUNLUK	94CM
BORU ÇAPI	2.5CM
NET AĞIRLIK	9.5KG
AĞIRLIK KAPASİTESİ	150KG

Kurulum ve Kullanım
Videosu için
For Installation and
Usage Video
Tarataınız.
Scan it.



Yayın Tarihi: 26.04.2023



ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN.TİC.AŞ

Cihangir Mah. Kemal Türkler Sok. No: 5/1
Avcılar/İstanbul/Türkiye 444 78 96
www.ecemedikal.net / www.respirox.com.tr


MONTAJ TALİMATI




1. Aksesuarlar: Çerçeve *1



2. Vida aksesuarları: 12 inç arka tekerlek *2 Erik çiçeği şekli topuzu *2; Kova *1; Conta *2; Vida *2; Vida somunu *2; Aylan anahtarı *1; İngiliz anahtarı *1

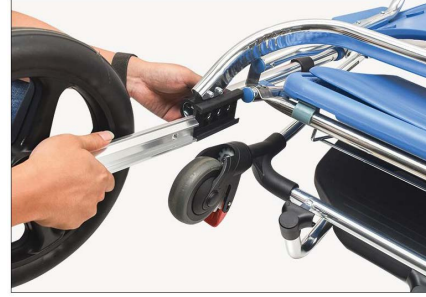

3. Çerçeveyi açın ve arka tekerlekleri şekildeki gibi takmaya hazır olun.

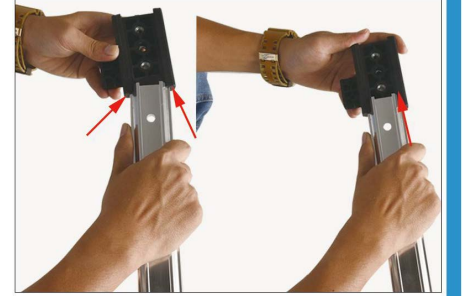

4. Arka tekerlekleri yerleştirin.



5. Arka tekerlekleri takınız.



6. Contayı şekildeki gibi yerleştirin.



7. Tekerleği ve çerçeveyi sıkıca sabitlemek için düğmeyi ayarlayın.



8. Çerçeveyi açın ve ayak pedalını şekildeki gibi yerine yerleştirin.



9. Vidayı ve somunu takın, anahtarla sıkın.



10. Kullanmadan önce sol ve sağ emniyet mandalını kilitleyin.



11. Sandalyeyi katlamak için güvenlik mandalını ayırın.



12. Kovayı brakete yerleştirin ve koltuğu arka çapraz çubuğa takın.